

# THALGO

LA BEAUTÉ MARINE

An aerial photograph of a coastline. The top half of the image shows a wide, sandy beach in a light tan color. A line of white, foamy waves separates the beach from the water. The water below is a vibrant turquoise color, with some darker patches visible further out. On the right side, there is a rocky area with some green vegetation.

iBeauty Pro



## Ein schnell wachsender Markt

- 20 % Wachstum im Zeitraum 2016-2023\*
- Besonders starke Nachfrage in Schönheitssalons, medizinische SPAs und in Asien - Naher Osten.
- Zwei Hauptbehandlungssegmente: Anti-Aging und Abnehmen
- Ein Motor für die Rentabilität des Salons
- Verstärkte Kompetenz und Wirksamkeit, mit Technologien, die oft aus dem Bereich der medizinischen Ästhetik stammen

- Chance, zusätzlichen Umsatz in einem lukrativen Markt zu generieren
- Das Equipment (Gerätetools) ermöglicht es, die sichtbare Wirksamkeit zu maximieren, wenn die Hände nicht ausreichen

\*Beauty Devices Market Research Report Global Forecast till 2023 <http://www.occamsresearch.com/beauty-devices-market>

# Die Konsumentin / der Konsument



In einem Zeitalter des Überkonsums, des „FAST & QUICK“  
(alles muss schnell gehen)

Die Verbraucher suchen nach Hautpflegebehandlungen,  
die effektiver und schneller sind als je zuvor:

JETZT DURCHSTARTEN:  
iBEAUTY PRO: Die High-Tech-Behandlung 2.0



- Ein universelles Anliegen mit einem großen Anti-Aging-Segment
- Bedarf an schnell sichtbarer Wirksamkeit mit sofortigem Nutzen
- Eine starke Erwartung der Verbraucher an sanfte und nicht-invasive Behandlungen

# Verbraucherziel

“Ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen, ich habe **nicht viel Zeit**”

Elisa, 34 Jahre



“Ich schwöre auf nichts außer auf **Technologie**”

Sarah, 20 Jahre



“Ich möchte noch mehr **sichtbare Ergebnisse** erzielen”

Annie, 59 Jahre



EIN BREITES UND ÜBERGREIFENDES ZIEL



# iBeauty Pro

## Instrumentelle Kosmetik der neuen Generation zur Maximierung der Wirksamkeit von Gesichtsbehandlungen

[Optimierte Schallschwingungen - Ultraschall - Radiofrequenz] + [neue E-FINGERS Mikrostromtechnologie ]



- OPTIMIERTE EXFOLIATION durch Klangvibrationen (Sound Vibration) für eine tiefere Reinigung
- MAXIMIERTE PENETRATION DER WIRKSTOFFE und EFFEKTIVITÄT durch Ultraschall
- ZONE-ZU-ZONE EFFEKTIVITÄT durch die neue Hochfrequenzspitze
- NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN (Lifting/Rötung/Dunkelheit) über E-Fingers

# iBeauty pro

## Neues Design & neue Funktionen



### Ein Gerät der neuen Generation mit modernisierter Ergonomie und Design

- Ein überarbeitetes Gerätedesign (Kieselsteinform), eine raffinierte Oberfläche mit "Soft-Touch-Effekt".
- Neu gestaltete Sonden für **besseren Halt**
- "Kabellose" E-Finger-Technologie, verbunden über Bluetooth
- Anpassung der Hülle und der Software an die **neue Unternehmenscharta**
- Großer 10-Zoll-Touchscreen
- Bluetooth- und WiFi-Konnektivität für weitere Ferndienste (Updates, Wartung usw.)

# iBeauty Pro

Vorher & Jetzt

VORHER


JETZT NEU

7-Zoll-Touchscreen



Spezielle kieselsteinförmige  
Geräteverschalung

Großer 10-Zoll-Touchscreen

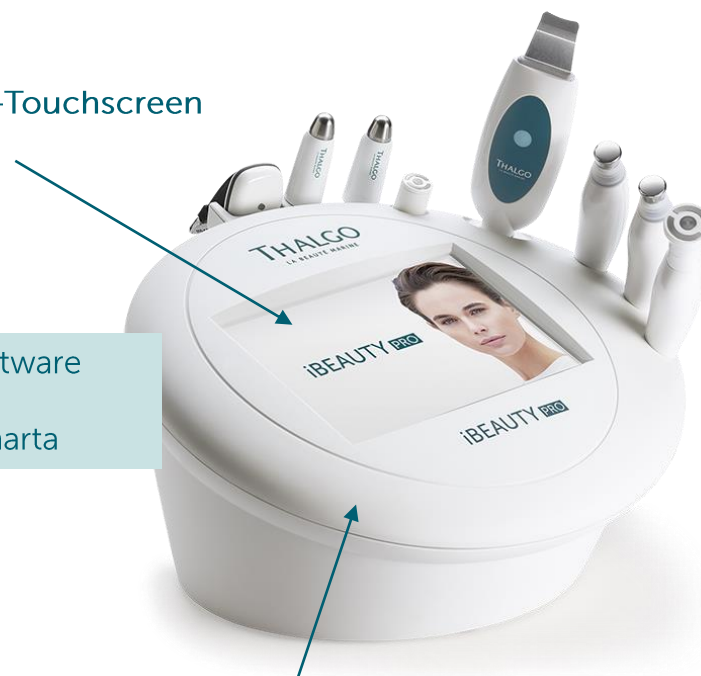

Anpassung der Software  
an die neue  
Unternehmenscharta

Neue modernisierte kieselsteinförmige Hülle

E-Finger Bluetooth  
Technologie  
(Uhr und E-Finger)



Neu gestaltete Sonden für  
verbesserte Griffbarkeit



Sound Vibrations    Ultraschall    Hochfrequenz

# iBeauty Pro

Exklusive Kombination aus vier Technologien für acht Behandlungsmöglichkeiten

## 4 Technologien

### 3 optimierte Technologien

- ✓ SOUND-VIBRATIONS, verstärkter Modus
- ✓ Leistungsstärkerer Ultraschall
- ✓ TRIPOLARE HOCHFREQUENZ + Microsonde für gezielte Bereiche

### 1 neue Technologie

+ E-FINGER MIKROSTROM  
Stimulation der Mikrozirkulation und der Muskeln

## 8 Behandlungswünsche

### 5 Behandlungen

- ✓ Reinigung
- ✓ Feuchtigkeit
- ✓ Ausstrahlung
- ✓ Falten / Anti-Aging
- ✓ Auffüllend & Plumping


### 3 neue Behandlungen

- + Lifting
- + Ausgleichend / ebenmäßiger Teint
- + Gezielte Augenbehandlung

iBEAUTY PRO – die nächste Generation 2.0



# STROM – Kurzer WissensCheck

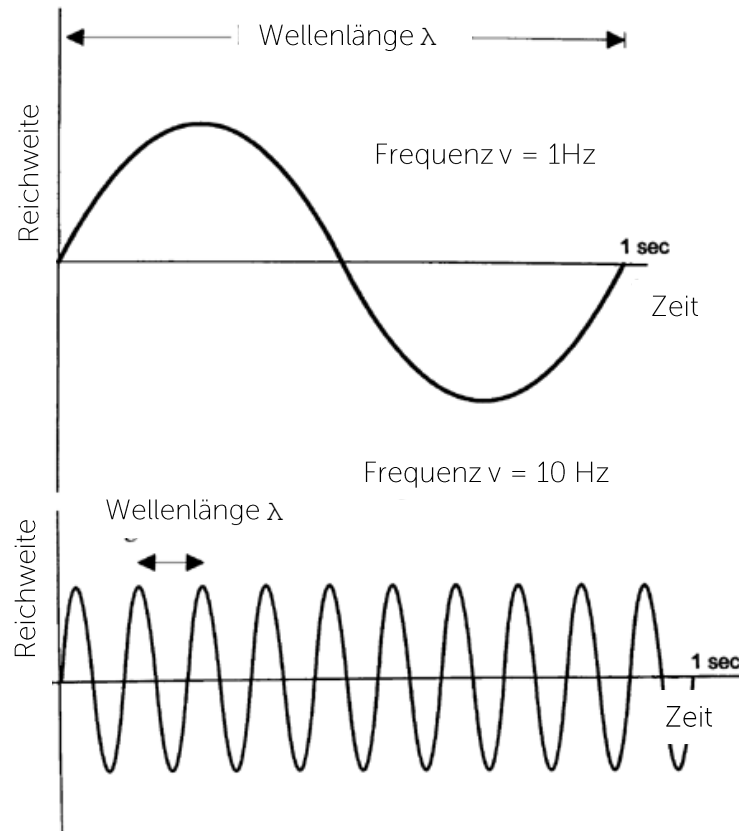

## STRÖME

Bewegung von Elektronen  
Energieübertragung

+ Hochfrequenz  
+ Arbeit an der Oberfläche

## WELLEN

Ausbreitung von Schwingungen  
Energieübertragung

+ Hochfrequenz  
Durchdringungsvermögen  
+ äußerliche Oberfläche

**Wellenlänge** = bei 1 Schwingung zurückgelegte Strecke in Metern

**Frequenz** = Hertz (Anzahl der Schwingungen der Wellenlänge pro Sekunde). 1 MHz = 1000 kHz = 1.000.000 Hz

**Leistung** = Watt/cm<sup>2</sup> (Geschwindigkeit der Arbeit, Menge der bereitgestellten Energie)

# iBeauty Pro

## Sound-Vibrationen



Technologie, die eine Tiefenreinigung der Haut ermöglicht und die Ergebnisse aller Behandlungen optimiert

- NEU: +++ INTENSITÄT IM BOOST-MODUS FÜR +++
- GRÜNDLICHERE REINIGUNG
- Hervorragende Verträglichkeit auch für die empfindlichste Haut

### Wie funktioniert das?

Die durch den Ultraschall erzeugte Vibration des Spatels kombiniert eine mechanische Wirkung mit der Mikronisierung der Exfoliating Lotion für eine gründliche Reinigung.

Ultra-schnelle Vibrationen: durchschnittlich 24 000 / s (durchschnittliche Frequenz 24 kHz, die innerhalb weniger Millisekunden von 22 bis 26 kHz variieren)

Das neue Anzeige (Leistung 110% und verdoppelte Frequenz) ermöglicht es, eine viel stärkere Vibration für eine tiefere Reinigung zu erhalten.

# SOUND VIBRATIONEN


## FOKUS AUF DEM STROM

2 Keramikplatten werden durch den Strom angeregt

1 rostfreie Klinge, die sich zwischen den 2 Keramikplatten befindet, vibriert bis zur Spitze


Frequenz 25 KHz = Einwirkung auf die Oberfläche

Boost-Modus = 2x häufigere Mikronisierung

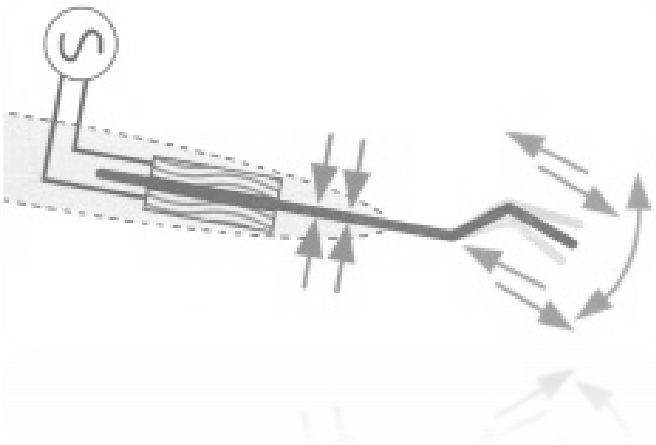

## SOFORT ERGEBNISSE

1. Mechanische Abschuppung = Beseitigung der abgestorbenen Hautzellen
2. Mikronisierung\* der THALGO Peeling-Lösung = emulgiert abgestorbene Zellen, Talg und Unreinheiten in der Lösung
3. Vertreibung aus den Poren durch nicht-aggressives Sprühen = +++ Reinigung

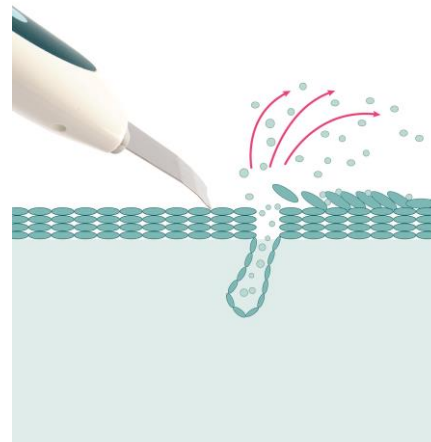

## VORTEILE DER BEHANDLUNG

- ✓ Peeling der Haut
- ✓ Tiefenreinigungsverfahren
- ✓ Für alle Hauttypen
- ✓ Bereitet die Epidermis auf die Aufnahme der Wirkstoffe vor
- ✓ Verleiht der Haut ein weiches und angenehmes Gefühl



# iBeauty Pro

## Sequentieller Ultraschall



### Patentierter Ultraschall für drei Behandlungsarten: Drainage, Infusion, Stimulation

- **NEUE VERSTÄRKTE LEISTUNG**, die sanfte Wärme erzeugt und das Eindringen der Wirkstoffe maximiert  
= **Verstärkte Wirksamkeit und wahrgenommene Wirkung**
- **Sequentielles Ultraschallpatent**: mehrere Wellen, die es ermöglichen, die Ergebnisse zu verbessern und die Behandlungsdauer zu verkürzen, dank einer optimalen Stimulation der Haut während der gesamten Behandlung

### Wie funktioniert das?

Die erzeugten Ultraschallsequenzen sind patentiert: Sie wechseln zwischen gepulsten und kontinuierlichen Signalen, um den Zellaustausch und den Stoffwechsel zu stimulieren.

Die Ausgangsleistung wurde für eine maximale Wirksamkeit (**max. 1,5 W/cm<sup>2</sup> ➔ 2 W/cm<sup>2</sup>**) in den drei Modi erhöht: Eindringen der Wirkstoffe, Gewebedrainage, Reaktivierung der Zellregenerationsprozesse.



# SEQUENTIELLER ULTRASCHALL

## FOKUS AUF DEN STROM

Ultraschall sind vibrierende Schallwellen, die von einer Keramikplatte erzeugt werden, sobald elektrischer Strom über sie fließt.


Die Keramikplatte ist verbunden mit einem Metallteil: dem Resonator = Sondenkopf, der die Schwingungsenergie auf die Haut überträgt

Frequenz 3 MHz = nicht spürbar = Wirkung auf die Haut

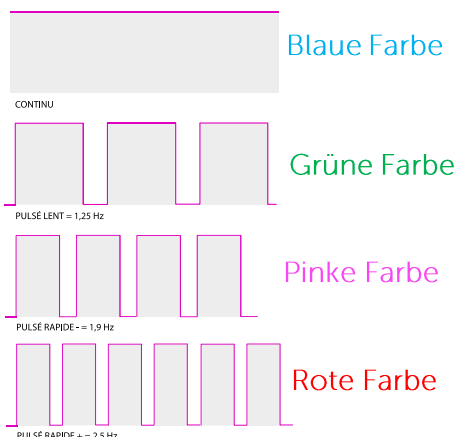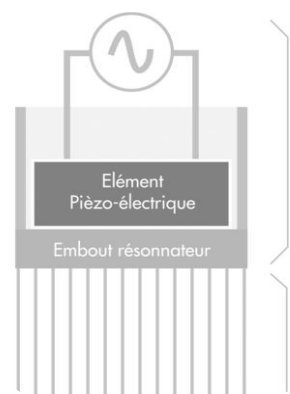

## SOFORT ERGEBNISSE

1. Drainage-Modus: langsame gepulste Emission für einen thermischen Effekt, der eine Vasodilatation = Gewebedrainage bewirkt
2. Infusionsmodus: kontinuierliche Emission für einen mikromechanischen Effekt, der Zwischenzellräume schafft = Wirkstoffpenetration
3. Stimulationsmodus: Schnelle und kontinuierliche gepulste Emission wie eine innere Mikromassage = Zellregeneration

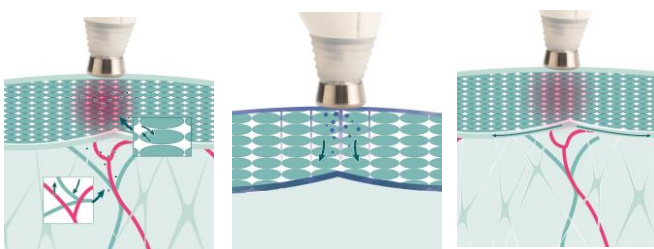

## VORTEILE DER BEHANDLUNG

- ✓ Eliminiert Schlacken/Abfallstoffe
- ✓ Führt Wirkstoffe gezielt in die Haut ein
- ✓ Stimuliert den Austausch von Zellen
- ✓ Das Patent verstärkt die Ergebnisse und verkürzt die Behandlungszeit
- ✓ Hydratation - Reinheit - Ausstrahlung





# iBeauty Pro

## Tripolare Hochfrequency



### Tripolare Sonde für einen Anti-Aging-Effekt durch Geweberegenerierung

- NEU: MIKROSONDE FÜR GEZIELTE GESICHTSBEREICHE (AUGEN / LIPPENKONTUR, etc.)
- NEU: KONSTANTE, GLEICHMÄSSIGE TEMPERATUR FÜR EIN OPTIMALES HAUTGEFÜHL
- Bessere Energieverteilung zwischen den drei Polen im Vergleich zu herkömmlichen (mono- und bipolaren) Hochfrequenzen für mehr Sicherheit

### Wie funktioniert das?

Hochfrequenter Mikrostrom, der zwischen den drei Polen der Sonde zirkuliert. Der Widerstand der Haut gegen den Durchgang des Mikrostroms führt zu einer inneren Erwärmung von bis zu 45°C.

Der Stoffwechsel der Fibroblasten wird für eine intensive Geweberegeneration reaktiviert.

Eine neue Technologie zur Analyse des Signals in Echtzeit, die es ermöglicht, den abgegebenen Strom ständig anzupassen, um ein konstantes und sicheres Wärmegefühl zu gewährleisten.

# HOCHFREQUENZ

## FOKUS AUF DEN STROM

Hochfrequenz-Mikrostrom

Dieser Strom erwärmt das Gewebe dank des elektrischen Widerstands der Haut.

Wirkung: Epidermis-Dermis


450 KHz Frequenz = wahrgenommene Erwärmung



Traitement RF

## SOFORT ERGEBNISSE

1. Kontraktion der Kollagenfasern = sofortiger Straffungseffekt
2. Stimulierung der Fibroblasten = Regeneration des Gewebes
3. Vasodilatation = Zellaustausch = Sofortige Rehydrierung

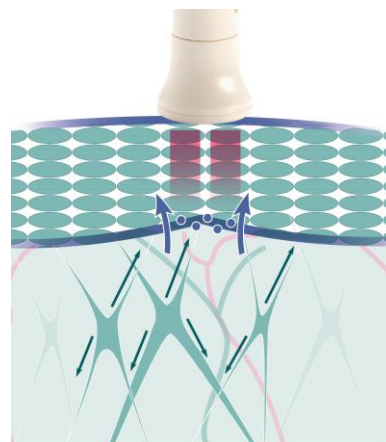

## VORTEILE DER BEHANDLUNG

- ✓ Regeneration der Haut
- ✓ Aufpolsternde und dauerhafte Anti-Falten-Wirkung dank eines Prozesses, bei dem die Haut im Inneren erwärmt wird





# iBeauty Pro

## E-Finger MIKROSTROM



**Zwei intelligente Finger, die für einen Lifting-/Anti-Rötungs-/  
Dunkle-Ringe-Korrektureffekt in eine natürliche Technik  
eingebunden sind**

- Zwei physiologische Mikrostrom-Programme: Stimulation der Mikrozirkulation und der Muskelstimulation
- Exklusive patentierte Bluetooth-Technologie in einem Multitechnologie-Behandlungsgerät (**weltweit exklusiv**)
- Kabellose Sonden, Fortsetzung der Finger von der Kosmtikerin

### Wie funktioniert das?

Stimulation der Mikrozirkulation: patentierte intermittierende Mikroströme, die die Gefäßwände stimulieren und die Gewebespülung und Sauerstoffversorgung optimieren

Muskelstimulation: programmierte **gepulste** intermittierende Mikroströme zur Stimulation der Gesichtsmuskeln über spezifische Stimulationsbereiche.

# E-FINGER MIKROSTROM

## FOKUS AUF DEN STROM




Mikroströme sind elektromagnetische Wellen, die durch zwei elektrisch stimulierte Elektroden erzeugt werden. Diese **biokompatiblen Elektroden** haben eine Spitze aus rostfreiem Stahl, die die Energie des Mikrostroms überträgt.

Mikrozirkulation Modus = intermittierender Strom vom Typ Neurovaskuläre Elektrostimulation

Muskelstimulationsmodus = gepulster intermittierender Elektrostimulationsstrom  
3 Frequenzen zur Auswahl: 5, 30 und 100 Hz

Modus Mikrozirkulation

Modus Muskelstimulation

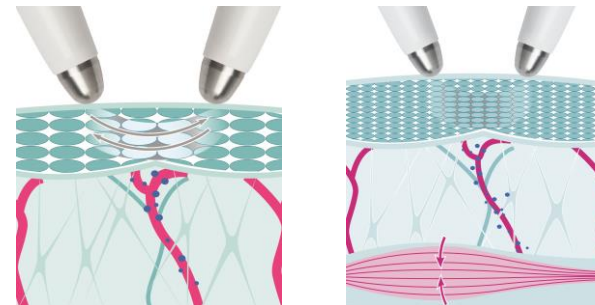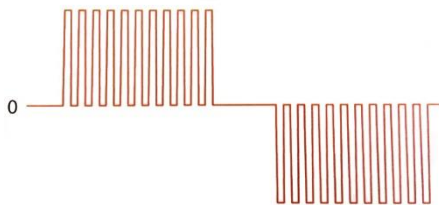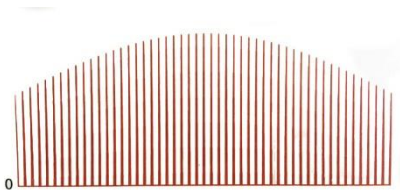

## SOFORT ERGEBNISSE

1. Mikrozirkulation Modus: verbessert die Blutzirkulation durch Venenerweiterung
2. Muskelstimulationsmodus: stimuliert die Muskeln im Rhythmus der elektrischen Impulse = Abfolge von Kontraktionen und Entspannung = Straffung und Tonisierung

## VORTEILE DER BEHANDLUNG

- ✓ Hebende Wirkung
- ✓ Ebenmäßigkeit
- ✓ Augenkontur



# iBeauty TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG

		iBeauty	iBeauty Pro
DREI VERSTÄRKTE TECHNOLOGIEN			
SOUND-VIBRATIONEN	Technologie	Vibrationsspachtel: mechanische Abschuppung + die Peeling-Wirkung der Lotion	Eine neue Funktion: BOOST-Modus kann mit einem Klick aktiviert/deaktiviert werden Stärkeres Signal (110%), verdoppelte Frequenz
	Vorteile	Optimiertes Peeling der Epidermis. Sanft und nicht sensibilisierend. Eine einzige Sonde für alle Hauttypen	Noch tiefere Reinigung für mehr Effektivität
ULTRASCHALL	Technologie	Patentierter spezifische Signale für eine optimale gezielte mechanische Stimulation während der gesamten Behandlung Drei Modi: Drainage, Infusion, Stimulation	<b>Erhöhte Leistung</b> (max. 1,5 W/cm <sup>2</sup> ➔ 2 W/cm <sup>2</sup> ), die ein neues Gefühl von <b>sanfter Wärme</b> auf der Oberfläche erzeugt
	Vorteile	Entwässerung des Gewebes, optimierte Penetration der Wirkstoffe, reaktivierte Zellregeneration	<b>Verstärkte Wirksamkeit und wahrgenommene Wirkung</b> <b>Maximierte Penetration der Wirkstoffe</b>
HOCHFREQUENZ	Technologie	Sichere Technologie: lokale und kontrollierte innere Erwärmung des Gewebes (43°C)	Signaloptimierung zur Gewährleistung einer konstanten, gleichmäßigen Temperatur.
	Vorteile	Sofort sichtbare Ergebnisse (Plumping-Effekt), geschmeidigere und straffere Haut im Laufe der Wochen	<b>Optimales Hautgefühl</b> , erhöhte Sicherheit.
ZWEI NEUE SONDEN			
HOCHFREQUENZ MIKROSONDE		Eine Gesichtssonde (30 mm), die nicht auf kleinen Flächen verwendet werden kann	<b>Zwei austauschbare Spitzen</b> , darunter eine (Ø 22 mm) speziell für bestimmte Bereiche (Augen, Lippen, NLF usw.)
E-FINGERS MIKROSTROM	Technologie	/	Eine <b>exklusive neue Technologie</b> : Die intelligenten Finger von E-Fingers. Patentierter physiologischer Mikrostrom als Innovation
	Vorteile	/	<b>Zwei neue Modi für drei neue Vorteile</b> - Stimulation der Muskeln: Lifting-Effekt - Stimulation der Mikrozirkulation: Anti-Rötung/Augenringe-Korrektur



# iBeauty Pro

Ein attraktives neues Behandlungsmenü



## FONDAMENTAUX, ANTI-ÂGE

### SOINS MANUELS / BOOSTÉS\*

#### Soins Fondamentaux

Soin Éclat Source Marine	60,00€
Soin Hydratant Source Marine	60,00€
Soin Purifiant Pureté Marine	60,00€
Soin Réconfortant Cold Cream Marine	60,00€
Soin Nourrissant Cold Cream Marine	60,00€
Soin Hydratant iBeauty Pro	48,00€

#### Soins Anti-âge

Soin Peeling Marin	60,00€
Soin Lissant Détoxifiant Spiruline Boost	65,00€
Soin Combleur Hyalu-Procollagène	70,00€
Soin Liftant Silicium Marin	80,00€
Soin Uniformisant Lumière Marine	75,00€
Soin Redensifiant Exception Marine	100,00€
Soin Régénérant Prodiges des Océans	140,00€
Soin Repulpant iBeauty Pro	58,00€

Soin Contour des yeux	50,00€
-----------------------	--------

### SOINS BOOSTÉS\*

**Vous recherchez un maximum de résultat visibles immédiatement ?**  
Les soins manuels boostés sont faits pour vous.  
Grâce à l'intégration au cours du soin de l'appareil iBeauty Pro THALGO,  
combinant plusieurs technologies innovantes,  
votre peau sera transformée et visiblement plus belle dès la 1<sup>ère</sup> séance.

\*À l'exception du Soin Peeling Marin

## Integration in alle manuellen Gesichtsbehandlungen \*

- +10€ auf den Grundpreis ohne Änderung des Zeitplans
- Ein einziges Behandlungsmenü, das für den Verbraucher klar und einfach zu lesen ist: Behandlungen mit oder ohne Gerät
- Zwei neue 100%ige instrumentelle Behandlungen: iBeautyPro Feuchtigkeitsbehandlung und iBeauty Pro Anti-Aging-Behandlung
- Eine neue Behandlung der Augenkonturen, die dank der E-Finger und der Mini-RF-Sonde Augenringe und Falten bekämpft

# iBeauty Pro

THALGO  
LA BEAUTÉ MARINE



Unterstützte manuelle Behandlungsabläufe\* - Einsatz von 3 Behandlungstools

## MANUELLE BEHANDLUNGEN

### Schritt 1 EINTAUCHEN – 20 Min

- Eveil à la mer
- THALGO Make-up Entfernung
- Manuelles Peeling

### Schritt 2 VITALISIEREN – 3 Min

- Energetisierende Akkupressur

### Schritt 3 PERFEKTIONIEREN – 28 Min

- Fokus setzen
- Meerestiefen-Massage oder Dermastim Massage
- Maske  
*+ Manuelle Massage mit Cold Cream Marine*

### Schritt 4 ERWACHEN – 4 Min

- Augenpflege auftragen
- Abschlusspflege
- Réveil à la Mer
- Nutri-Cosmetics

## DURCH iBeauty pro UNTERSTÜTZTE MANUELLE BEHANDLUNGEN

### Schritt 1 EINTAUCHEN – 25 Min

- Eveil à la mer
- THALGO Make-up Entfernung
- Manuelles Peeling
- iBeauty Pro: Sound-Vibrations\*\*

DOPPELTES  
PEELING

### Schritt 2 ENERGISE – 3 min

- Energetisierende Akkupressur

### Schritt 3 PERFEKTIONIEREN – 23 Min

- Fokus setzen
- iBeauty Pro: Ultraschall / Hochfrequenzen oder E-FINGER
- Maske  
*+ Manuelle Massage mit Cold Cream Marine*

PERSONALISIERTE  
TECHNOLOGIE Anstelle  
der Massage\*\*\*

### Schritt 4 ERWACHEN – 4 min

- Augenpflege auftragen
- Abschlusspflege
- Réveil à la Mer
- Nutri-Cosmetics

\* außer Peeling Marin Behandlung

\*\* außer der Cold Cream Marine Meerestiefen-Behandlung oder Nährende Behandlung (trockene und empfindliche Haut)

\*\*\* mit Ausnahme der Exception Marine Behandlung "Ritual für maximale Hautregeneration Behandlung", bei der die E-Finger nach der Massage eingesetzt werden

# iBeauty Pro

Einzelheiten zu den unterstützten manuellen Behandlungen im Gerät

## BEHANDLUNGEN FÜR HAUTPROBLEME

## ANTI-AGING BEHANDLUNGEN

Sound Vibrationen 4,5 Min\*

SOURCE MARINE  
STÄRKENDE FEUCHTIGKEITSBEHANDLUNG



Ultraschall  
Infusion 8 Min

GLÄTTENDE SPIRULINA BOOST  
DETOX-BEHANDLUNG



Drainage Ultraschall 4 Min  
+ Stimulation 4 Min

PURETÉ MARINE  
MEERESTIEFEN-BEHANDLUNG



Ultraschall  
Drainage 8 Min

FALTENKORRIGIERENDE HYALU-  
PROCOLLAGÈNE PFLEGEBEHANDLUNG



Hochfrequenz 8 Min

COLD CREAM MARINE  
KURZBEHANDLUNG\*



E-Finger  
Mikrozirkulation 13 Min

FESTIGENDE & STRAFFENDE SILIZIUM  
LIFT BEHANDLUNG



E-Finger Muskelstimulation 4 Min  
+ Hochfrequenz 4 Min

COLD CREAM MARINE  
MEERESTIEFEN-BEHANDLUNG \*



Ultraschall  
Infusion 13Min

EXCEPTION MARINE / RITUAL FÜR  
MAXIMALE HAUTREGENERATION



E-Finger  
+ Muskelstimulation 10 Min

FORCE MARINE BEHANDLUNGEN



Ultraschall  
Infusion 8 Min

LUMIÈRE MARINE / BRIGHTENING  
BEHANDLUNG GEGEN PIGMENTSTÖRUNG



Drainage Ultraschall 4 Min

PRODIGE DES OCÉANS  
SIGNATURE TREATMENT GESICHT



Drainage Ultraschall 4 Min



+ Hochfrequenz 8 Min



+ E-Finger Muskelstimulation 6 Min

\* außer Cold Cream Marine Meerestiefen- und Kurzbehandlung (trockene und empfindliche Haut)

# Produkte für die Kabine

<p><i>Neu</i></p>  <p>KT19019</p>	<p><i>Neu</i></p>  <p>KT19020</p>	<p><i>Neu</i></p>  <p>KT19021</p>
<p><b>PEELING LOTION</b> - KT</p>	<p><b>HYDRATING GEL</b> - KT</p>	<p><b>PLUMP GEL</b> - KT</p>
<p>Diese Lotion ist reich an Gluconsäure, um die Haut sichtbar zu peelen.</p>	<p>Ein ultrafrisches Gel, das speziell für Ultraschall- und Mikrostrombehandlungen entwickelt wurde</p>	<p>Ein Anti-Aging-Gel für Ultraschall-, Hochfrequenz- und Mikrostrombehandlungen</p>
<p>Peelend</p>	<p>Durchfeuchtend</p>	<p>Aufpolsternd</p>





5

WIRKSAMKEITSTEST



# NACHGEWIESENE WIRKSAMKEIT – iBeauty Pro

**VERBESSERT DIE HAUTQUALITÄT UM 100%\***

- Die Haut verändert sich sichtbar 94%\*
- Die Haut ist schöner 94%\*

LIFTENDE WIRKUNG

AUFPOLSTERNDE WIRKUNG

GLÄTTENDE WIRKUNG

GLOW-EFFEKT

VORHER

NACHHER



100% angenehm\*  
100% zufrieden\*  
100% würden diese  
Behandlung gerne  
wiederholen\*  
100% empfehlen\*

Rechtlicher Hinweis zu beachten: Klinische Studie unter dermatologischer Aufsicht, durchgeführt an 16 Freiwilligen (Frauen, 45-60 Jahre alt, alle Hauttypen einschließlich empfindlicher Haut, mit fahlem Teint, Hauterschaffung und sichtbaren Falten auf der Stirn), die eine Salonbehandlung durchgeführt haben.

\* Selbsteinschätzung der Behandlung durch die Probanden (% der Probanden, die der Aussage zustimmen und überwiegend zustimmen)

\*\* Klinische Bewertung der Stirnfalten, der Erschlaffung des Halses, der Straffung, des Aufpolsterns und des Strahlungseffekts nach einer Behandlung.

# NACHGEWIESENE WIRKSAMKEIT – iBeauty Pro

**VERBESSERT DIE HAUTQUALITÄT UM 100%\***

## LIFTENDE WIRKUNG

Instrumentelle Messung\*\*  
+ 28.57%: Lifting-Effekt (87,2% der Probanden)

- 94%: Das Gesicht wirkt modelliert
- 88%: Straffere Haut
- 88%: Das Gesicht wirkt wie geliftet
- 75%: Wangen praller
- 75%: Gesichtskonturen neu geformt

## GLÄTTENDE WIRKUNG

- 94%: Falten geglättet
- 94%: Augenkonturfalten geglättet
- 94%: Gesichtszüge wirken geglättet
- 88%: Nasolabialfalten verblasst

## AUFPOLSTERNDE WIRKUNG

Instrumentelle Messung\*\*  
+ 43.55%: Plumping-Effekt (87,2% der Probanden)

- 100%: Die Haut ist hydratisiert
- 100%: Haut aufgepolstert
- 100%: Haut geglättet
- 100%: Ebenmäßigeres Hautbild
- 100%: Getönte Haut
- 100%: Anzeichen von Müdigkeit verblasst
- 94%: Poren gestrafft

## GLOW-EFFEKT

Instrumentelle Messung\*\*  
+ 69.49%: Ausstrahlung des Teints (100% der Probanden)

- 100%: Strahlenderer Teint
- 100%: Der Hutton ist gleichmäßiger

Rechtlicher Hinweis zu beachten: Klinische Studie unter dermatologischer Aufsicht, durchgeführt an 16 Freiwilligen (Frauen, 45-60 Jahre alt, alle Hauttypen einschließlich empfindlicher Haut, mit fahlem Teint, Hauterschaffung und sichtbaren Falten auf der Stirn), die eine Salonbehandlung durchgeführt haben.

\* Selbsteinschätzung der Behandlung durch die Probanden (% der Probanden, die der Aussage zustimmen und überwiegend zustimmen)

\*\* Klinische Bewertung der Stirnfalten, der Erschlaffung des Halses, der Straffung, des Aufpolsterns und des Strahlungseffekts nach einer Behandlung.

---

Die Kraft  
des Meeres  
für Ihre Schönheit

---

THALGO  
LA BEAUTE MARINE